


Exposition Internationale de BRUXELLES 1935.
MEDAILLE D'ARGENT

DIPLOME D'HONNEUR

APPAREILS ELECTRO - MEDICAUX

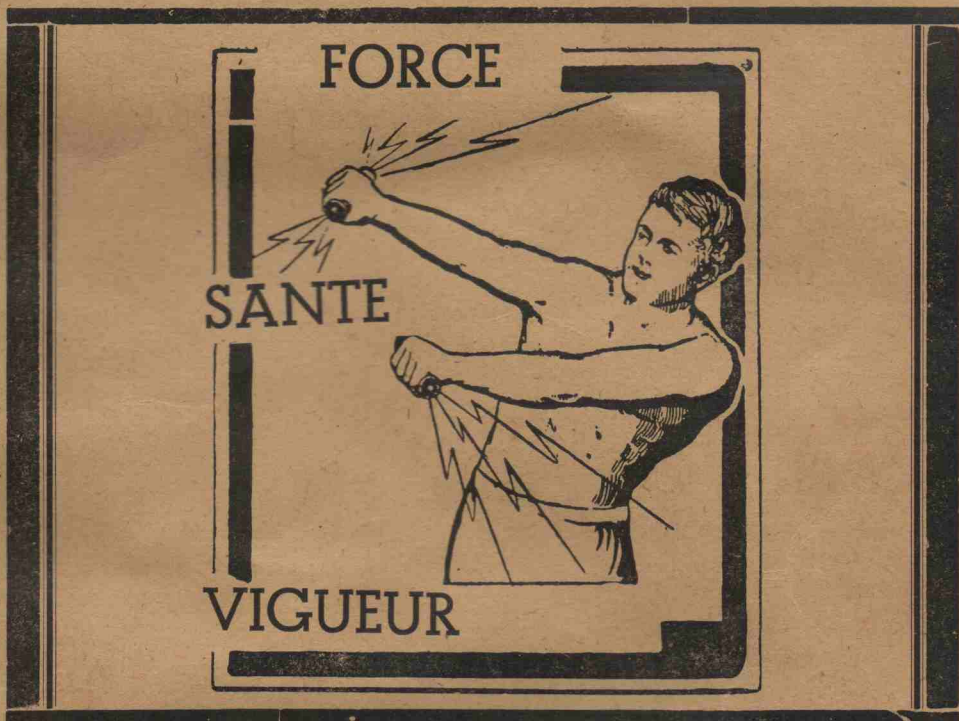

ANCIENNEMENT PLACE SAINT-JEAN

ELECTRICITE MEDICALE
dans toutes ses applications

*L'Auxiliaire Electrique
et Centrale Médicale*

216, AVENUE LOUISE

BRUXELLES

CONSTRUCTION

TELEPHONE 48.51.79

REPARATION

Chèque Postal : 1489.87

Reg. Com. : 409.37

Demandez sans obligation nos Catalogues des Appareils Electriques pour
Médecins - Cliniques - Hôpitaux - et Dentistes - Matériel et
Accessoires pour Malades et Infirmes.


Fabrication Belge

Appareil à Haute Fréquence

66 **EVERAY** 99

RAYONS VIOLETS

Tous nos appareils sont à voltage universel fonctionnant sur tous les réseaux compris entre 100 et 250 volts

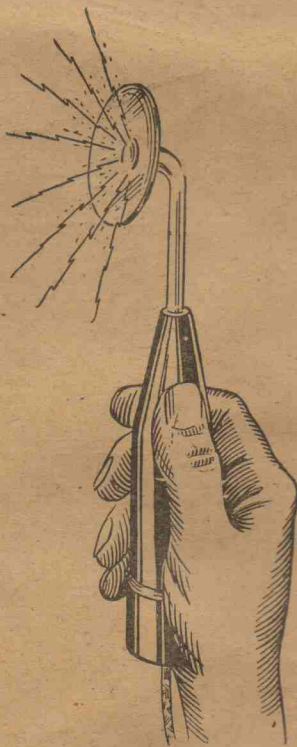


Calme toutes vos douleurs

LES APPAREILS SONT GARANTIS DEUX ANS

Consommation minime de courant

Signez un nouveau bail avec votre santé
en employant l'appareil

" EVERAY "

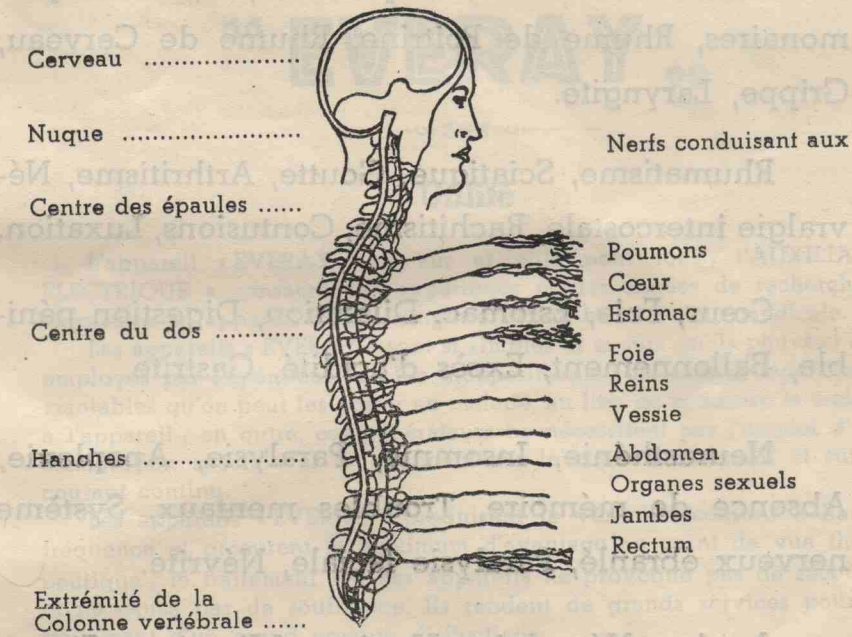

Le centre nerveux du corps
humain est l'épine dorsale.

Obtenez un bon fonctionne-
ment du centre nerveux et
les organes qu'il contrôle
fonctionneront normalement.

L'application des RAYONS VIOLETS à l'épine dorsale donne d'excellents résultats.

Bronchite, Asthme, Coqueluche, Catarrhes pulmonaires, Rhume de Poitrine, Rhume de Cerveau, Grippe, Laryngite.

Rhumatisme, Sciatique, Goutte, Arthritisme, Névralgie intercostale, Rachitisme, Contusions, Luxation.

Cœur, Foie, Estomac, Dilatation, Digestion pénible, Ballonnement, Excès d'acidité, Gastrite.

Neurasthénie, Insomnie, Paralyse, Apoplexie, Absence de mémoire, Troubles mentaux, Système nerveux ébranlé, Paralyse faciale, Névrite.

Angine, Névralgies, Vertiges, Migraines, Sinusites, Rage de Dents, Surdité, Soins de beauté, Massage.

Mauvaise circulation du sang, Dartres, Eczéma, Clous, Rougeurs.

Surmenage, Fatigue, Découragement.

Constipation, Hémorroïdes, Troubles menstruels, Soins intimes.

Faiblesse des reins, Anémie, Néphrite, Calculs du rein.

Varices.

Lumbago, Courbature, Foulure, Epanchement de synovie, Entorse, Cors aux pieds.

Appareils à Haute Fréquence

“ EVERAY ”

Utilité

L'appareil « EVERAY » est sûr et utile pour tous ; l'AUXILIAIRE ELECTRIQUE a consacré son expérience et des années de recherche à construire un appareil solide, simple et d'une haute valeur médicale.

Les appareils « EVERAY » sont si simples et si sûrs qu'ils peuvent être employés par l'opérateur le plus inexpérimenté ; ils sont si légers et si maniables qu'on peut les porter au malade, au lieu de conduire le malade à l'appareil ; en outre, ces générateurs ne nécessitent pas l'emploi d'une canalisation spéciale et fonctionnent sur le courant alternatif et sur le courant continu.

Les appareils « EVERAY » produisent le véritable courant à haute-fréquence et procurent le maximum d'avantage au point de vue thérapeutique ; le traitement par ces appareils ne provoque pas de secousse et ne cause pas de souffrance. Ils rendent de grands services pour le traitement d'un grand nombre d'affections.

Que sont les rayons violets ?

Le courant électrique à haute-fréquence, communément appelé « Rayons Violets » est produit en conduisant le courant ordinaire d'éclairage à travers une série de bobines contenant plusieurs kilomètres de fil très fin, provoquant ainsi une si grande rapidité d'oscillations électriques que les nerfs humains y sont insensibles. Il est appliqué au corps, à travers un tube de verre vide d'air, ou électrode, qui produit une lumière couleur violette ou pourpre. Les « Rayons Violets » ne causent pas de douleur ou de sensation désagréable. Leur action est agréable, douce, stimulante et fortifiante.

On avait constaté depuis longtemps la propriété de l'électricité à rétablir ou maintenir l'équilibre naturel au corps, mais comment appliquer le traitement sous une forme agréable. Là était le problème. La science a démontré que le corps humain ne nécessite pas un grand ampérage ou intensité de courant pour obtenir les résultats désirés, mais un puissant voltage qui puisse pénétrer dans chaque cellule individuelle du corps et la fortifier dans sa lutte continue pour triompher des agents étrangers qui la troublent. Ce courant doit être appliqué sans malaise pour le malade et ceci est maintenant réalisé avec succès par l'appareil à haute-fréquence « EVERAY ».

Si nous touchions les extrémités des deux bornes dans une douille de lampe électrique, nous ressentirions instantanément une secousse violente causée par la contraction musculaire. Ceci est dû au fait que les oscillations sont lentes.

La science a démontré que les nerfs sensitifs sont susceptibles de ressentir la douleur provoquée par des ondes ou oscillations électriques jusqu'à 100.000 à la seconde, nous pouvons l'appliquer au corps humain sans crainte de provoquer de malaise. Le générateur à haute-fréquence « EVERAY » produit un courant dont les oscillations s'élèvent à plusieurs millions par seconde, de cette façon, toute sensation douloureuse est évitée.

Les appareils « EVERAY » sortant des ateliers de l' « AUXILIAIRE ELECTRIQUE » à Bruxelles, sont construits avec des matériaux soigneusement vérifiés, donc de toute première qualité, sont d'une grande robustesse et peuvent être employés par les personnes les plus inexpérimentées.

Les appareils « EVERAY » sont à Voltage Universel 110 - 220 volts.

TOUS LES APPAREILS SONT GARANTIS DE BON FONCTIONNEMENT.

Rapports généraux de l'électricité avec la santé

Afin d'entretenir une réserve de force pour les besoins journaliers de la vie et de maintenir l'équilibre entre la déperdition et le réapprovisionnement, une certaine somme de sommeil, de nourriture, d'air pur et d'exercice est absolument nécessaire ; supprimez l'une de ces conditions, cherchez à tergiverser au delà d'un certain point et vous dérangez l'équilibre ; la réserve de force s'épuise graduellement et au bout de quelques temps, la maladie et l'invalidité chronique surviennent forcément. Mais on a un remède contre la PERTE DE FORCE VITALE.

L'électricité dans le corps humain et ses effets curatifs sur l'organisme

L'électricité a été employée pendant longtemps sous diverses formes par les médecins et de merveilleux résultats ont été enregistrés dans de nombreux rapports d'hôpitaux rédigés par d'éminents praticiens. Mais jusqu'à la découverte des courants à haute-fréquence et l'invention de générateurs à haute-fréquence, ces résultats ont été obtenus en causant de pénibles douleurs au malade. On sait, depuis de nombreuses années, que le courant électrique à haute-fréquence, est de beaucoup supérieur en puissance bactéricide à n'importe quel autre employé par la médecine. Ceci est principalement dû à ce que l'ozone qui est produit par le courant et qui réoxyde le sang par la voie des poumons, rend, par entrée directe, dans les tubes capillaires les phagocytes (Corpuscules blancs) plus forts pour combattre les germes nocifs et les toxines.

L'électricité est à la fois tonique et calculée.

Elle tonifie et calme les nerfs dès qu'ils sont soumis à son influence. Elle rend leur action normale à l'estomac, aux poumons, au cœur, au foie, aux reins, à la vessie, à l'utérus, aux ovaires et à tous les muscles. Elle purifie le sang, désinfecte toute matière impure qui peut séjourner dans le système, et aide les organes à les expulser par les canaux à ce destinés,

soulage la douleur locale en supprimant les causes qui la produisent et en fortifiant le système entier, comme ne peut le faire aucun remède connu de la science.

Le courant de haute fréquence stimule la nutrition, augmente la combustion intérieure, brûle les déchets organiques, régularise les fonctions de l'appareil circulatoire et, enfin, agit en souverain maître avec une autorité incontestable et incontestée sur toutes les affections du système nerveux.

Il modifie la valeur du fluide nerveux, excite et stimule les lymphatiques, les obèses, les affaiblis, les déprimés, calme, adoucit, régularise les hyperexcités, les sanguins et les agités.

Tonifie les muscles, va masser leurs fibres jusqu'au sein de l'organisme et, grâce au transport moléculaire spécialement obtenu par le courant à haute fréquence, épure et assainit le sang.

L'électricité s'attaque directement, non à l'effet, mais à la cause du mal.

L'électricité dispense presque toujours l'usage interne de médicaments, en supprime les inconvénients et les conséquences parfois très graves.

Lorsque, dans une localisation rebelle, l'électricité ne suffit pas par elle-même, elle permet de faire pénétrer, avec elle et directement dans l'organe malade, la médication utile, sans la faire passer par l'estomac.

L'expérience nous a souvent démontré que bien des malades hésitaient à se faire traiter par cette méthode par crainte de l'électricité. Cette crainte n'est plus justifiée actuellement, car la science électrothérapique a fait des progrès énormes et est arrivée, pour ainsi dire, à son point culminant.

Grâce aux appareils perfectionnés de l'AUXILIAIRE ELECTRIQUE, toutes les applications médicales de l'électricité sont devenues agréables et douces, tout en obtenant le summum d'efficacité et de puissance.

Leurs effets

1. - Un accroissement de circulation du sang à l'endroit où l'électrode est appliquée. Cette circulation activée est essentielle pour obtenir la guérison de toute douleur ou maladie locale.

2. - Une augmentation générale d'oxydation et de nutrition locale, c'est-à-dire que le sang s'oxyde davantage en absorbant plus d'oxygène et les tissus qui étaient imparfaitement nourris reçoivent l'aliment dont ils ont besoin. Ceci est prouvé par le fait que des cheveux gris ont repris leur teinte naturelle après l'emploi répétés des « Rayons Violets », ceux-ci ont également fait repousser les cheveux dans le cas où la calvitie était due à un appauvrissement du cuir chevelu.

3. - Le bioxyde de carbone et les autres éléments toxiques renfermés dans les tissus sont rapidement rejetés. Il élimine l'auto-intoxication ou empoisonnement des tissus par les matières morbides des intestins, le rhumatisme cède à ce procédé de nettoyage.

4. - Une augmentation de toutes les sécrétions utiles. La digestion et l'assimilation sont améliorées et les fonctions affaiblies redeviennent normales.

5. - L'Ozone est inhalé pendant le traitement parce que l'air en est chargé par les effluves de l'appareil, le courant passant dans le corps

porté avec lui de l'ozone aux tissus internes. L'air est rapidement purifié par l'ozone produit. L'eau peut être purifiée en un instant par contact avec ce courant. L'ozone tue tous les germes et bactéries.

6. - L'application sur l'épine dorsale augmente l'activité de tous les organes vitaux. Le système nerveux qui contrôle les organes de nutrition et d'élimination est amené à l'activité positive (voir notre gravure en première page).

7. - L'absorption de l'exsudation plastique est favorisée.

Maniement de l'appareil « EVERAY »

Comme les appareils « EVERAY » sont dépourvus de connexions avec la terre, leur maniement est dénué de tout danger. Aucune crainte donc à avoir lorsqu'on saisit l'appareil pour faire soi-même la première application. Bien vite on se sent en sécurité et l'on apprend à s'en servir correctement.

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL : Les appareils « EVERAY » peuvent se brancher sur toute installation de lumière et s'emploient aussi bien sur le courant continu que sur le courant alternatif. Il faut simplement veiller à ce que l'appareil soit commandé pour le voltage dont on dispose 110/130 ou 220 volts. Les appareils « EVERAY » peuvent s'adapter à n'importe quelle prise de courant ou à défaut à un socket prise.

PAS DE BRUTALITE : On enfoncera l'électrode, à employer, dans le manche avant de brancher l'appareil sur le courant. On le fera avec douceur de façon à ce que l'électrode soit bien fixée dans la poignée.

MISE EN MARCHÉ : L'appareil étant correctement relié au réseau, on le met en marche en tournant à droite le bouton placé sur la boîte jusqu'à ce que l'appareil fasse entendre un bourdonnement régulier et que l'électrode s'illumine. En tournant davantage, on renforce l'énergie. Un dispositif annexé au bouton empêche toute menace de détérioration de l'appareil.

L'appareil « EVERAY » ainsi mis en marche, on procède alors au traitement. Pour éviter la production d'étincelles lorsqu'on applique l'électrode sur la peau, on conduira l'électrode avec la main sur la région du corps à traiter, puis on lâchera prise. Le traitement terminé, on fera la manœuvre inverse puis on tourne à gauche le bouton régulateur jusqu'à ce que cesse le bourdonnement.

On coupera d'abord le circuit de l'appareil, puis seulement alors on débranchera la prise de courant.

DEPENSE DE COURANT MINIME : La dépense de courant équivaut à celle d'une lampe de 25 Watts.

Observations :

L'isolement des électrodes a pour but de prévenir un déchargement prématuré des courants de haute fréquence et permet en même temps à ceux-ci de donner tout leur rendement.

Eviter l'emploi des appareils de haute fréquence immédiatement après un lavage du corps ou des cheveux avec des solutions alcooliques, car il y aurait danger de brûlures.

Nous nous réservons le droit d'apporter aux appareils les modifications qui s'imposeraient.

REMARQUE IMPORTANTE. - Les électrodes pour les cavités du corps doivent être introduites et enlevées pendant que l'appareil se trouve à l'arrêt complet. Après l'introduction de ces électrodes on augmente l'in-

tensité du courant graduellement en tournant le bouton de réglage.

Le **nettoyage** et la **stérilisation** des électrodes se font au moyen d'une savonnée ou d'alcool.

Le traitement par la haute fréquence en général n'exerce aucun effet nuisible sur le malade et est absolument sans danger.

Tableau de traitement

Beaucoup de maladies résistant aux médications sont toujours soulagées et souvent guéries par les courants de haute fréquence, ce traitement électrique en général, apporte toujours une aide à l'organisme pour lutter contre les troubles et retarder le plus possible l'évolution du mal ou tout au moins l'amoinrir. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que toutes les affections, dont nous donnons la liste, peuvent être guéries par l'électricité, il est malheureusement des maladies incurables, rebelles à tout traitement. Mais nous les soulageons toujours.

ABCES. - Les effluves constituent un moyen prophylactique des abcès quand il existe des gerçures ou des crevasses.

Si l'abcès est en formation, massez pendant cinq minutes sa surface et les contours trois fois par jour avec l'électrode 1. S'il se régresse, fulgurez pendant quelques secondes avec l'électrode 9. Il ne tardera pas à s'ouvrir. On le vide et on le traite pendant dix minutes, deux fois par jour, avec l'électrode 1. S'il y a dépression physique, faire le traitement tonique général avec l'électrode n° 14.

ACNE. - Faire plusieurs massages quotidiens de trois à cinq minutes avec l'électrode rouleau N° 27. On peut fulgurer chaque élément avec l'électrode 9 pendant quelques secondes et recommencer chaque jour jusqu'à assèchement et guérison.

ADENITE. - Traitement général par l'électrode 14. Contact de l'électrode 1 sur les ganglions, sans étincelle, cinq minutes deux fois par jour. Continuez à suivre le traitement du médecin, prendre des fortifiants et faire une cure d'air et de repos.

ALGIES. - Traitement tonique général avec l'électrode 14. Soigner le membre malade tout entier. Effluver à l'aide de l'électrode 1, deux minutes trois fois par jour. Passer le long des muscles avec l'électrode 2.

ALOPECIE. - Se peigner trois fois par jour, pendant cinq minutes avec l'électrode 4 à une intensité moyenne.

Tenir en main l'électrode 14 et, en même temps se faire masser doucement le cuir chevelu par une autre personne. La chute s'arrête et les cheveux ne tardent pas à repousser plus épais et plus vigoureux.

AMENORRHEE. - Ne pas confondre avec la grossesse. L'arrêt du flux mensuel est dû à la faiblesse générale, à l'anémie ou à toute autre maladie de la nutrition. Dans ce cas, introduire l'électrode 19 dans le vagin, l'appareil étant à l'arrêt et le tenir bien en contact avec les parties pour éviter des étincelles qui seraient désagréables. Après trois minutes, arrêter l'appareil et puis retirer l'électrode. Faire un traitement général avec l'électrode 14 à répéter deux fois par jour.

AMYGDALITE. - Placer l'électrode 6 sur le cou pendant 5 minutes, deux fois par jour. Si nécessaire, employer l'électrode 13 et inhaler avec l'électrode 28.

ANEMIE. - Appauvrissement du sang dépendant de plusieurs causes (hémorragies, maladies infectueuses troubles digestifs, vers intestinaux, chlorose, tuberculose, syphilis, etc...). Un traitement général avec l'électrode 14 est un coadjuvant efficace de la médication ferrugineuse et de la vie au grand air, à la montagne. Durée 5 minutes par jour. Effluer tous les deux jours la colonne vertébrale avec l'électrode 3 et faire des inhalations d'ozone de deux minutes plusieurs fois par jour avec l'électrode 28.

ANGINE. - Même traitement que pour l'amygdalite (voir ce mot).

ANGINE DE POITRINE. - Affection du cœur, douloureuse avec impression d'angoisse et sensations d'étouffement. Eviter la fatigue, les émotions, la marche contre le vent, la montée d'escaliers, les efforts. Il faut abandonner complètement le tabac. Régime réduit, parfois régime lacté. Employer l'électrode 8 au niveau du cœur quelques minutes, deux fois par jour, intensité faible.

ANOSMIE. - Voir maladie du nez.

APHASIE NERVEUSE. - Voir maladie du pharynx.

ANTHRAX. - Même traitement que pour l'abcès (voir ce mot).

APOPLEXIE. - Voir paralysie.



Fig. 1.

APHONIE NERVEUSE (fatigue de la voix).
- Massage extérieur de la gorge avec l'électrode 6, durant quatre à cinq minutes. Ce traitement est tout particulièrement précieux pour les chanteurs (voir fig. 1).



Fig. 2.

ARTHRITISME. - Ce trouble de la nutrition générale comprend beaucoup de maladies qui affectent tous les tissus et organes. Des myalgies (douleurs musculaires), des névralgies, des lésions osseuses et articulaires, des affections hépatiques, rénales, cardiaques, des troubles de la circulation (varices, hémorroïdes, congestions, etc...) nombre de lésions de la peau (eczéma, dartres, herpès, etc...) sont des manifestations de l'arthritisme.

Cette cause unique d'un grand nombre de maladies nous explique le triomphe d'un traitement unique, car ce traitement se dresse contre la cause même du mal et, par conséquent, révèle toutes ses manifestations. C'est ici contre l'arthritisme, que la haute-fréquence, sous ses diverses formes (d'effluvation, d'étincelage et de fulguration) s'affirme souveraine.

Elle agit sur la cellule, sur la circulation du sang, sur les nerfs, et, par conséquent sur la nutrition générale (métabolisme). Elle provoque l'élimination des déchets organiques et des toxines. L'effluve a une action spécialement sédative et résolutive. L'étincelage agit localement sur les organes traités soit par l'action propre à l'électricité, soit par la douce chaleur (diathermie) et par la révulsion. La fulguration produit la régression des croissances anormales (pathologiques). Pour agir sur tout le corps, faire un traitement général de 5 minutes deux fois par jour, avec l'électrode 1. Agir directement par l'étincelage et par la fulguration contre les manifestations diverses (arthritisme, gouttes, douleurs, etc.) (voir ces mots). Fig. 2.



Fig. 3

ASTHME. - Chez les enfants.: faire les inhalations d'ozone brèves, mais fréquentes. Si les amygdales sont hypertrophiées, faire des applications en conséquence (voir amygdalite) et une application par jour de l'électrode 14 (contre l'adénopathie). Chez les adultes : une application générale tous les jours. Fréquentes inhalations d'ozone, spécialement au moment de l'accès. Suivre un régime léger sans excitants. Traiter la bronchite chronique, les lésions nasales, le tube digestif, le foie, l'utérus, qui peuvent être la cause de l'asthme. La personne asthmatique bénéficie beaucoup en respirant dans un milieu chargé d'ozone. Ozoniser la chambre à coucher pour assurer le repos avec notre ozonateur spécial (fig. 3). Voir aussi page 24.

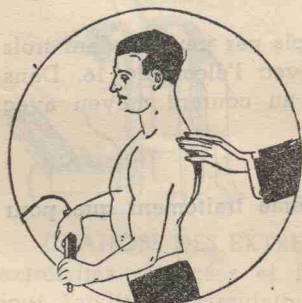


Fig. 5.

ARTERIO-SCLEROSE. - Avec l'âge et par l'action de l'alcool, du tabac, par l'arthritisme, par l'auto-intoxication chronique (constipation, dépression morale) les artères deviennent dures et fragiles. Un effort suffit pour qu'une petite artère du cerveau mal soutenue par la substance cérébrale molle, se rompt, donnant lieu à une hémorragie (apoplexie). Cet accident grave est d'autant plus fréquent que la personne est robuste.

L'artério-sclérose comporte quantité de troubles, parce que le système vasculaire malade rend tous les organes insuffisants. Suivre un régime lacto-végétarien et maintenir le corps libre. Eviter les efforts physiques et moraux.

Application générale quotidienne par l'électrode 14. Faire un massage avec l'électrode 3 à l'intensité moyenne, le long de la colonne vertébrale. Eviter l'étincelage qui pourrait augmenter la pression. Les vertiges, l'insomnie, la céphalée, les troubles de la circulation, les refroidissements des extrémités sont influencés d'une manière favorable et activés par ce courant de haute-fréquence. (Voir aussi le mot Arthritisme). Fig. 5.

SOINS DU
SANTÉ,
BEAUTÉ.

VISAGE



CORRECTION DES RIDES

Faire des applications générales nutritives par l'électrode 14. Faciliter par des effluviations légères la circulation pour combattre les rides, le relâchement des tissus. Provoquer le développement des muscles faibles par le massage indirect. Refouler la graisse par le rouleau 27.

BLENHORRAGIE. - Nous recommandons de faire appliquer le traitement interne par un médecin. Le traitement externe tout le long des parties sexuelles avec électrode 1 à courant doux une ou deux fois par jour, 5 à 6 minutes.

Pour la femme, le traitement vaginal une fois par jour pendant trois minutes avec l'électrode 19. Pour l'homme avec l'électrode 16. Dans les cas aigus, une effluviation du bas-ventre au courant moyen avec l'électrode 2 (5 à 6 minutes).

BOUTONS. - Même traitement que pour l'acné. (Voir ce mot).

BRONCHITE. - Plusieurs inhalations d'ozone par jour avec l'électrode 28. Effluves et révulsion sur la poitrine et au dos à l'aide de l'électrode 1. Application générale par l'électrode 14 (fig. 4).



Fig. 4.

BRULURES. - Utiliser l'action bactéricide et sédative de l'effluviation par l'électrode 1. Faire une application générale pour activer la circulation en relevant l'état général du patient.

BEAUTE (soins de). -

La beauté dépend : de la santé, qui donne la fraîcheur au teint, la vivacité au regard, de la forme aux lignes harmonieuses. La forme est elle-même une conséquence de la santé, qui comporte le développement normal des organes et des tissus. Une dame de 40 à 50 ans, au teint frais, est plus agréable à regarder qu'une jeune fille de 20 ans, pâle, jaunâtre, languissante, sans expression.

Soins de beauté signifie donc soins de santé. Il faut avant tout, combattre la constipation qui intoxique, vieillit et donne un teint dépourvu de charme.


CŒUR. — Application de l'électrode 8 sur la région du cœur pendant 5 minutes, exerce une action sédative et dans les formes douloureuses et dans les palpitations nerveuses. Les lésions cardiaques peuvent être conséquence de l'arthritisme. (Voir ce mot et Angine de poitrine).

COMEDONS. — Etinceler chaque point noir avec l'électrode 9. La matière sébacée se ramollit. Faire pression avec les doigts.

CONSTIPATION. — Application générale tonique avec l'électrode 14 et massage indirect de l'abdomen, pour fortifier l'intestin et rétablir ses fonctions normales. Utiliser l'électrode rectale 20 pendant 3 minutes à intensité moyenne. Appliquer l'électrode avant de mettre l'appareil en fonction. Arrêter celui-ci avant de retirer l'électrode.

COQUELUCHE. — Les quintes de toux pénibles et déprimantes sont atténuées et distancées à l'aide de l'électrode 27 sur le cou et la poitrine, intensité supportable. Faire des inhalations d'ozone sans approcher l'électrode du nez de l'enfant ou mieux, ozoniser la pièce. Faire des saturations avec l'électrode 14, 5 minutes, deux fois par jour, pour prévenir les séquelles parfois graves de cette maladie.

CORS. — Fulguration par l'électrode 9 après un bain de 20 minutes dans de l'eau savonneuse chaude. La partie dure cornée tombe après quelques jours. Eviter les frottements et les compressions anormales des orteils.

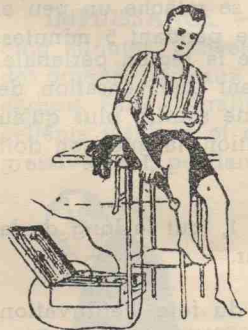

COUPEROSE. — Même traitement que pour l'eczéma. Soigner l'estomac, la constipation et voir le mot Arthritisme.

CRAMPES. — Etincelage à travers les vêtements avec l'électrode 2 sur les muscles contractés ou sur la région de l'estomac s'il s'agit de crampes à cet organe, ou de la main s'il s'agit de crampes d'écrivain. Application générale par l'électrode 14. 5 minutes trois fois par jour.

CYANOSE DES EXTREMITES. — Effluation avec l'électrode 2 sur les extrémités violacées et froides pendant cinq minutes, deux fois par jour. Faciliter la circulation et relever l'état général par des applications du courant à l'aide de l'électrode 14.

DARTRES. — Même traitement que pour l'eczéma. (Voir ce mot et Arthritisme).

DEMANGEAISONS. — Voir Prurit.

DENTS. — Contre les douleurs, effluations légères des gencives avec l'électrode d.e.f. pendant quelques minutes.

Contre l'inflammation des gencives et l'abcès, se servir d'une électrode appropriée par sa forme à la configuration de la partie malade.

DIABETE. - Suivre le régime et la cure indiquée par le médecin et faire des applications générales de 5 minutes tous les jours par l'électrode 14.

DISMENORRHEE. - Même traitement que pour l'aménorrhée.

DOULEURS MUSCULAIRES. - Voir massage.

ENTORSE. - L'étincelage de 5 minutes deux fois par jour avec un courant assez fort, pour faire une révulsion, abrège de beaucoup la durée du mal et exerce une action sédative sur la douleur. Employer l'électrode 1 ou 2.

ECZEMA. - Faire des effluves avec l'électrode 2 dans les formes prurigineuses et étincelage léger de 5 minutes. Traitement général par l'électrode 14 et régime si le sujet est arthritique (voir arthritisme).

ENGELURES. - Applications générales quotidiennes de 5 minutes avec l'électrode 14, pour combattre la scorfule, la faiblesse, l'anémie, qui en sont souvent la cause. Contre le prurit (voir ce mot) effluvements et bains chauds. Se servir de l'électrode 25 contre les engelures ulcérées.

ESTOMAC. - Contre les phénomènes douloureux, étincelage avec l'électrode 1.

FISSURE SPHINCTERAGIQUE. - Appliquer l'électrode 20 enduit de vaseline. Sous l'influence du courant, le sphincter se relâche un peu et l'électrode pénètre dans le rectum, où on le laisse pendant 5 minutes. On termine la séance par une courte effluvation de la région périanale. Le sujet ne ressent aucune douleur, mais seulement une sensation de chaleur. Au bout de quelques séances, le malade ne souffre plus qu'au moment de la défécation. Vers la quinzième application, la guérison doit être complète.

PHLEBITE. - Effluvation à l'aide de l'électrode 1, tout le long de la jambe durant 5 minutes, une ou deux fois par jour.

FOIE. - Dans toutes les formes d'insuffisance du foie, l'effluvation de la région de cet organe est utile. Se servir de l'électrode 1. Cinq minutes par jour, avec un courant d'intensité moyenne. Faire aussi, tous les jours, une application générale de 5 minutes avec l'électrode 14.

FURONCLE. - Même traitement que pour l'abcès.

GOITRE EXOPHTALMIQUE. - Par un mouvement circulaire, passer l'électrode 6 sur le cou pendant 5 minutes deux fois par jour. Le traitement dure plusieurs mois. On note d'abord la diminution des vomissements de l'insomnie, des tremblements, l'amélioration des troubles digestifs. La régularisation des règles, ensuite l'exophtalmie et puis le goitre, qui disparaît complètement.

GOUTTE. - Voir arthrite et arthritisme.



GRIPPE. - Traitement général avec l'électrode 14, 5 minutes par jour.

Plusieurs inhalations d'ozone avec l'électrode 28. Ce traitement abrège la durée de la maladie et prévient les complications.

HEMORROIDES. - La technique pour le traitement est la même que pour les fissures sphinctérales. Les accidents inflammatoires sont, en général, très rapidement modifiés. Lorsqu'il y a des petites fissures qui s'éraillent à chaque défécation, le traitement doit être continué plus longtemps pour empêcher les rechutes. Combattre la cause générale (voir Arthritisme). Employer les électrodes 20, 21 ou 23.

HERPES. - Voir eczéma.

HYSTERIE. - L'électricité agit sur l'état général du malade comme un reconstituant et représente le procédé le plus simple et le plus efficace de rééducation pour combattre les diverses manifestations hystériques. Contre les paralysies, les contractures, les algies et les hyperesthésies, étincelage avec l'électrode 1. Masser la nuque et la poitrine avec l'électrode 2. Employer l'électrode 17, 18 ou 19.

IMPUISSANCE. - Application générale tonique avec l'électrode 14, cinq minutes. Etincelage de la colonne vertébrale avec l'électrode 3 et des organes génitaux avec l'électrode 1. Séance de 5 minutes pour chaque endroit. Faire le traitement externe des parties sexuelles. Il donne d'excellents résultats et doit être fait à courant faible en augmentant progressivement, pendant 4 à 5 minutes par jour, avec l'électrode 1 sur les testicules et sur la verge, traitement des ovaires avec l'électrode 17, 18 ou 19, de préférence fait par un médecin.



Fig. 9.

LUMBAGO. - Passer l'électrode 2 sur la région douloureuse en immobilisant quelques secondes sur les points particulièrement sensibles. Faire ce traitement deux fois par jour. (Fig. 9).

MASSAGE. - Toutes les fois qu'il faut fortifier les muscles (atrophies, faiblesse, etc.), faire un massage indirect : le malade tient l'électrode 14 en main pendant qu'une autre personne masse avec la main le muscle, le groupe musculaire, l'abdomen, etc...

METRITES. - Les applications doivent être faites par l'électrode 18 ou 19 pendant 4 à 5 minutes par jour ou tous les deux jours pendant 10 à 12 séances : après les règles, il est recommandable de faire deux ou trois séances supplémentaires.



Fig. 6.

MAUX DE TÊTE. - Saturation avec l'électrode 14 ; ensuite, passer l'électrode 27 sur le front et les tempes. Massage de la nuque avec l'électrode 6. (Fig. 6).



Fig. 7.

MAUVAISE CIRCULATION DU SANG. - Saturation avec l'électrode 14 deux fois par jour pendant 5 minutes, et surtout le matin à jeun.

NEURALGIES. - Passer rapidement sur la peau l'électrode condensatrice 2 et faire une révulsion plus ou moins intense. Effluation contre la douleur aiguë pendant 5 minutes. Combattre la cause (parfois l'arthritisme) et faire une application générale avec l'électrode métallique 14. (Fig. 7).

NEURASTHENIE. - Révulsion sur tout le corps par l'étincelage avec l'électrode 1 (10 minutes). Contre la céphalée et l'insomnie, effluation cinq minutes.

Contre les algies, les fourmillements, les engourdissements, révulsion. Les palpitations, la dyspnée, l'angoisse disparaîtront par l'effluation ou un léger étincelage.

NEZ (Maladie du). - Se servir de l'électrode 11. L'introduire successivement dans chaque narine et laisser passer un courant faible pendant deux minutes. Faire des inhalations d'ozone à l'aide de l'électrode 28 pendant quelques minutes, pour arrêter une hémorragie nasale. (Epistaxis).

OBESITE. - Traitement généralisé avec l'électrode 14 ou 2. Cinq minutes par jour. Marche et exercices.

OEIL. - L'inflammation palpébrale, conjonctivale, les névralgies orbitales sont traitées utilement à l'aide de l'électrode 7. On applique l'électrode sur l'œil fermé et on fait passer le courant faible pendant 3 minutes deux fois par jour.



Fig. 8.

OREILLES. - Se servir de l'électrode 12, qui ne doit pas être introduite trop profondément (il suffit d'un centimètre). Application de trois minutes, deux fois par jour. Courant faible. (Fig. 8).

OSTEOMYCLITES CHRONIQUES. - Les courants de haute-fréquence sont très efficaces sous forme d'application générale avec l'électrode 14 et à l'aide de l'électrode condensatrice 2.

OVAIRES. - Faire de l'étincelage pendant cinq minutes par jour avec l'électrode 1, le long des aînes et sur le bas-ventre, pour combattre l'insuffisance ovarienne.

PANARIS. - Effluer le panaris avec l'électrode 1, cinq minutes par jour pour accélérer l'évolution et continuer le traitement comme pour l'abcès. (Voir ce mot).

PELLICULES. - Masser le cuir chevelu à l'aide de l'électrode 4 à courant moyen pendant 4 à 5 minutes, une fois par jour.



Fig. 10.

PARALYSIE INFANTILE. - Chercher à provoquer les réactions musculaires par des étincelages espacés. Employer l'électrode 1 pendant cinq minutes tous les jours. Application générale de dix minutes avec l'électrode 14. Le traitement de la paralysie est long. Il faut le continuer avec persévérance. (Fig. 10).

PROSTATITES. - Même traitement que pour les hémorroïdes en employant l'électrode 20, 21 ou 23.

PRURIT. - Combattre la cause, parfois l'arthritisme (voir ce mot), la constipation (voir ce mot). Faire des effluations ou des frictions avec l'électrode 2.

PSORIASIS. - Même traitement que pour l'eczéma. (Voir ce mot).

REINS. - Les douleurs rénales bénéficient du massage avec l'électrode 2, cinq minutes deux fois par jour. Si les urines sont troubles et laissent déposer du sable, voir arthritisme. Si elles moussent, appeler le médecin.

RETOUR D'AGE. - Cessation de l'activité ovarienne chez la femme. Saturation avec l'électrode 14 pendant 5 minutes, de préférence à jeun.

Application des rayons sur l'abdomen et les reins avec les électrodes n° 2 pendant cinq minutes, 3 fois par jour.

RHUMATISME. - Le traitement général doit toujours accompagner le traitement local dans les diverses formes du rhumatisme chronique. Séance quotidienne de 5 minutes avec l'électrode 14. Effluation et étincelage sur l'articulation douloureuse 5 minutes. Voir aussi le mot arthritisme.

SCIATIQUE. - Se servir de l'électrode 1 ou 2 et la passer le long de la cuisse 5 minutes au moment de l'attaque. Soigner l'arthritisme (voir ce mot.)

POUR LES SEINS
DÉVELOPPEMENT ET RAFFERMISSEMENT



SEINS. - Pour raffermir ou développer les seins. Coiffer le mamelon avec l'électrode 26 pendant 5 minutes tous les jours. Etincelage autour du sein pendant deux minutes avec l'électrode 1.

TABE. - Application générale de haute-fréquence par l'électrode 14 pendant 5 minutes. Masser avec l'électrode 3 sur la partie douloureuse (moëlle cervicale, région dorsale, région dorso-lombaire).

TUBERCULOSE. - Inhalations d'ozone brèves, mais fréquentes. Application générale par l'électrode 14 et suivre les prescriptions du médecin.

URTICAIRE. - Combattre l'intoxication alimentaire et éviter la constipation (voir ce mot et le mot arthritisme). Utiliser l'action sédative de la haute-fréquence (voir démangeaison).

VARICES. - Saturation avec l'électrode 14 pendant 5 minutes. Masser les veines visibles avec l'électrode 1 pendant 5 à 6 minutes deux fois par jour.

VERRUES. - Fulguration d'une minute tous les jours jusqu'à disparition. Electrode 9.

VICES DU SANG. - Voir mauvaise circulation.




Conclusion

Il résulte de cette liste des maladies et de leur traitement, que la haute-fréquence trouve un vaste champ d'application pour la thérapie et l'hygiène.

Mais les indications que nous avons données ne sont que des exemples et nous nous inclinons devant les médecins, qui peuvent modifier et multiplier ces notes, car le médecin peut établir, pour chaque malade, le diagnostic et le traitement le plus efficace.

Instructions Générales

1. - Ne jamais mettre d'huile ni de graisse dans l'appareil.
2. - Vérifier le voltage 110 ou 220 volts.
3. - Mettre l'appareil en relation avec la source électrique.
4. - Fixer l'électrode dans le manche ébonite (pour la saturation et électrodes, voir plus loin).
5. - Si le générateur ne bourdonne pas aussitôt, tourner la vis de réglage du côté FORT.

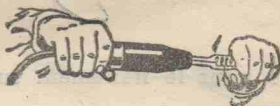

Pour l'emploi du saturateur et des électrodes internes.

- a) Relier l'appareil à la prise de courant sans le faire fonctionner.
- b) Fixer le saturateur dans le manche en ébonite, tenir le saturateur bien serré dans la main et mettre l'appareil en fonctionnement.
- c) Le traitement terminé, interrompre le courant et enlever la prise.

RECOMMANDATIONS. - Ne jamais retirer la main du saturateur pendant que le courant est établi, afin de ne pas s'exposer à ressentir une secousse désagréable, mais absolument sans danger.

Pour l'emploi de l'appareil il est préférable de se placer sur un parquet ou un sol isolé, ne pas toucher de robinets d'eau ou de gaz, ne pas l'utiliser lorsque l'on est dans le bain.

Si vous n'utilisez pas l'appareil ne le laissez pas inutilement sur le courant, débranchez-le.

Pour l'inhalateur d'ozone

- a) Fixer l'inhalateur dans le manche comme une électrode ordinaire.
- b) Pour l'usage, tenir l'inhalateur d'une main et actionner la soufflerie de caoutchouc de l'autre. (Voir fig. 3 et 4).

Pour l'ozonateur d'appartement


1. - Fixer la fiche mâle de l'appareil à haute-fréquence dans la fiche femelle de l'ozonateur.
2. - Faire pénétrer la tige métallique de l'ozonateur dans le manche en ébonite de l'appareil haute-fréquence.
3. - Fixer la fiche mâle de l'ozonateur dans la prise de courant.
4. - Tourner le bouton du générateur jusqu'à dégagement d'ozone désiré.

Electrodes


Nos électrodes sont faites en verre spécial, ce qui leur permet de résister à de brusques contractions et à la dilatation due à la chaleur.

Toutes nos électrodes sont munies d'une douille en cuivre de 11 mm. du type maintenant reconnu universel.


Nomenclature des électrodes

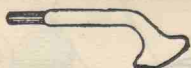


- 1 - Electrode de surface pour le traitement superficiel du corps
et du visage fr. 15.-

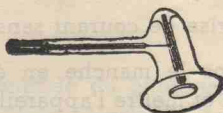


- 2 - Condensatrice pour traitement intensif des organes situés pro-
fondément dans le corps (Néon-hélium) fr. 25.-
(Rayons violets) fr. 20.-

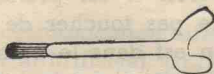


- 3 - Electrode pour le traitement de la colonne vertébrale ... fr. 15.-

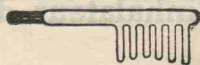

- 4 - Peigne pour le traitement du cuir chevelu fr. 15.-

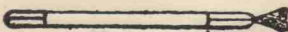

- 5 - Pinceau pour stimuler les nerfs fr. 15.-

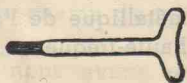


- 6 - Exo-Laryngée, pour application externe de la gorge et de la
nuque fr. 15.-



7 - Oculaire pour stimuler le nerf optique fr. 15.-



8 - Spirale pour traitement du cœur fr. 15.-

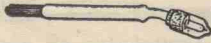

9 - Fulguratrice pour le traitement des verrues, cors, etc. ... fr. 15.-



10 - Pour les paupières fr. 15.-



11 - Nasale isolée fr. 15.-



12 - Auriculaire isolée fr. 15.-



13 - Intra-Laryngée, traitement interne à la gorge fr. 15.-




14 - Saturateur pour traitement tonique et électrification
(d'Arsonvalisation) fr. 15.-



15 - Spatule électrode de la langue fr. 15.-


16 - Urétrale, pour les maladies du canal et de la vessie ... fr. 15.-

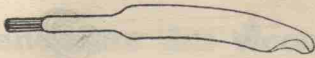

17 - Vaginale toute surface active ... fr. 15.-



18 - Vaginale, extrémité seule active ... fr. 20.-

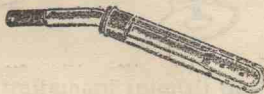


19 - Vaginale isolée et perforée pour génération de l'ozone ... fr. 20.-




20 - Rectale ordinaire ... fr. 15.-




21 - Rectale toute surface active ... fr. 15.-

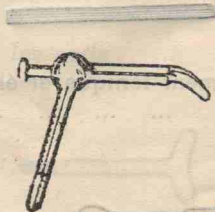


22 - Prostate, système Bub ... fr. 75.-

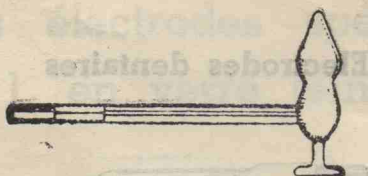

23 - Hémorroïdale pour traitement personnel, système Bub ... fr. 75.-

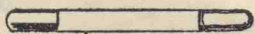

24 - Tube témoin bouts métalliques aux deux extrémités ... fr. 15.-

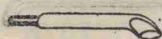

25 - Pour traitement de plaies, avec surface concave pour introduire de l'ouate imbibée de substances médicamenteuses fr. 15.-




25b - Cataphorétique, grand modèle ... fr. 20.-



26 - Pectorale pour le développement des seins ... fr. 30.-



27 - Forme rouleau pour massage du corps et du visage, remplace avantagement l'électrode de surface n° 1, qui, devant glisser donne un léger contact (au néon) ... fr. 40.-

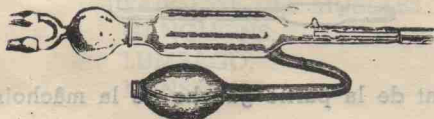

28 - Inhalateur avec pulvérisateur dans la sphère. Produisant l'ozone souverain pour guérir rhumes, gripes, pneumonies, soulageant toutes maladies des voies respiratoires. Cette électrode, lorsqu'elle est employée avec l'appareil « EVERAY », produit une grande quantité d'ozone. Le mélange inhalateur est versé dans la boule de verre. Lorsque l'on presse la soufflerie en caoutchouc, l'ozone passe au travers du mélange inhalateur, lequel est aspiré sous forme de vapeurs ozonisées. Le générateur d'ozone se place dans le manche comme une autre électrode, la main doit être en contact avec le corps de verre ... fr. 50.-

Electrodes dentaires



- a) Dentaire à fulguration fr. 15.-




- b) Cataphorétique pour dentiste fr. 15.-



- c) Tête creuse fr. 15.-



- d) Pour le traitement des gencives de devant fr. 15.-

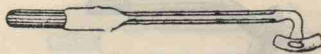

- e) Pour le traitement de la partie droite de la mâchoire fr. 15.-



- f) Pour le traitement de la partie gauche de la mâchoire fr. 15.-



- g) Pour le traitement intérieur de la mâchoire fr. 15.-

Aucune électrode n'est reprise ni échangée après livraison

Emploi des électrodes spéciales de surface N° 1, en verre teinté naturel



ROUGE

ANEMIE.
ASTHME.
DEMANGEAISONS.
HYDROPIE.
LUXATIONS.
MALADIES CUTANÉES.
MELANCOLIE.
OPPRESSION.

BLEU

CALMANT POUR LES NERFS.
INSOMNIE.
MALADIES DES NERFS.
MAUX DE TÊTE.
NEURASTHÉNIE.
SURMENAGE.
VERTIGE.


JAUNE

ATROPHIE DES MUSCLES.
CRAMPES.
CONGESTION DU FOIE.
COURBATURE.
FAIBLESSE DES MUSCLES.
GANGLIONS.
LUMBAGO.
MENSTRUÉS.

OPALINE

DOULEURS ARTICULAIRES.
DOULEURS DES HANCHES.
FORTIFIE LES GLANDES.
GOUTTE.
RHUMATISME.
TORTICOLIS.

Prix de l'électrode : Frs. 30.—

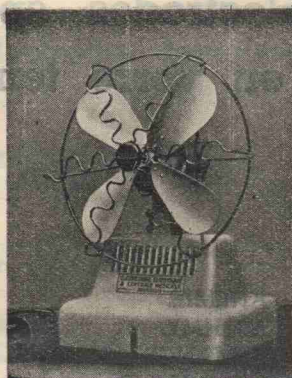

CARACTERISTIQUES :

Type	Tension	Numéro de liste	Suffisant pour des locaux de m ³	Hauteur totale mm.	Diamètre du ventilateur mm.	Consommation watts	Poids approximatif kg.
OF.	110 V. courant continu ou 125 V. alternatif	103.166	200 à	310	210	35	2,5
	220 V. courant continu ou alternatif	103.167	300				

L'Ozone en Thérapeutique

L'Ozone

L'ozone est connu dans la médecine comme un élément antiseptique très efficace. Il a la faculté de détruire les microbes moyennant un procédé d'oxydation et de stimuler les cellules vitales. L'inhalation d'ozone par notre organisation détruit les éléments usés et malades, fortifie le sang et produit un état de bien-être du malade, ce qui est très important pour les mélancoliques et les neurasthéniques. L'ozone est spécialement employé contre les maladies du nez, de la gorge et des poumons. L'inhalateur guérit en peu de temps les maladies du larynx, l'insomnie, l'asthme, la pneumonie, la tuberculose et de façon efficace la toux, le rhume, le catarrhe, la grippe, la bronchite, toutes maladies des organes de la respiration.

Action physiologique et thérapeutique de l'ozone

Un grand nombre de maladies (anémie, coqueluche, laryngite, etc.) sont traitées par l'ozone, qui donne également des résultats très satisfaisants dans le traitement de la tuberculose.

L'ozone en thérapeutique

Dans l'air renfermant 1 milligr. 5 à 2 milligr. d'ozone par litre, la bactérie charbonneuse, le bacille d'Eberth, le staphylocoque, le bacille de Löffler, les spores d'asporgillus niger ne se développent pas en culture. Les cultures de charbon sont tuées au bout de quatre jours.

Action physiologique de l'ozone

L'hémoglobine, matière colorante du sang veineux, se transforme, pendant la respiration, en oxyhémoglobine, matière colorante du sang artériel, en absorbant l'oxygène et, réciproquement, l'oxyhémoglobine du sang artériel, échangeant avec les tissus son oxygène, redevient hémoglobine. Dans les globules rouges l'oxygène est à l'état d'ozone, expliquant ainsi l'activité des oxydations qui se produisent dans l'organisme par les échanges entre le sang et les tissus.

Au moyen de l'hématospectroscope, on a pu constater rapidement et très simplement les modifications de l'oxyhémoglobine du sang sous l'influence de l'O³.

Sous l'influence même d'une inhalation d'ozone de dix minutes de durée, l'oxyhémoglobine augmente chez des sujets bien portants, d'une façon remarquable, à la condition toutefois que ces sujets présentent une proportion d'oxyhémoglobine un peu inférieure à la moyenne physiologique qui est de 14 p.c. Des expériences faites, l'augmentation a été jusqu'à 2 p.c.

Action de l'O³ sur les globules rouges et blancs

Des nombreuses expériences faites sur des malades, il résulte de la numération recueillie avant et après un certain temps de traitement par l'ozone (trois semaines, un mois), que le chiffre des globules rouges a subi une ascension proportionnelle à l'augmentation de l'oxyhémoglobine.

En même temps qu'on constate une augmentation des globules rouges, toujours parallèle à l'augmentation de l'oxymoglobine, on a pu observer une progression décroissante des globules blancs.

L'Ozone dans la tuberculose pulmonaire

Les uns, déjà très avancés dans leur évolution tuberculeuse n'en ont retirés que peu ou pas de bénéfices, les autres ont presque tous obtenu un arrêt dans la progression de leur maladie, une véritable régression du processus bacillaire.

Il serait trop long de reproduire ici toutes les feuilles d'observation. Contentons-nous de signaler que des malades partis de 7 à 10 p.c. d'oxyhémoglobine, ont gagné respectivement de 5 à 1 p.c., l'augmentation moyenne de poids était d'environ 3 kilos, retour à l'appétit, suppression des sueurs et des vomissements, la toux devient de plus en plus rare pour ne plus se produire qu'au réveil, avant de disparaître complètement. L'expectoration purulente devient muqueuse et de moins en moins abondante. Aucune hémoptysie ne s'est reproduite pendant le traitement.

L'Ozone dans la coqueluche

Il ressort d'une façon manifeste et évidente, que l'ozone produit une amélioration immédiate, chez presque tous, les quintes ont été rapidement modifiées, non seulement comme fréquence, mais aussi comme intensité et durée, l'angoisse respiratoire et la cyanose devenaient presque nulles et les vomissements disparaissaient. Les enfants reprenaient presque rapidement leur gaieté et leur bonne mine antérieure. Aucun des petits malades ne fut atteint de complications broncho-pulmonaires si

souvent observées et si justement redoutées dans cette maladie.

Lorsque, pour une cause quelconque on suspend le traitement pendant un jour ou deux, on voit les quintes reparaître avec toute leur intensité. Ce qui démontre la réelle et indiscutable action de l'ozone dans cette affection.

L'action physiologique de l'ozone sur le sang est également bien intéressante à étudier. Le nombre de globules rouges augmente rapidement dans des proportions parfois étonnantes. Des malades présentant au début du traitement une pauvreté globulaire manifeste, voient rapidement le nombre des globules rouges croître de 50 p.c. et parfois même de 100 p.c. Cette augmentation n'est pas passagère, elle se maintient aussi longtemps que l'on administre les solutions d'ozone. Quand on cesse, nous avons pu le constater chez les malades à peu près guéris et qui interrompent de temps à autre leur traitement, le nombre de globules rouges, reste néanmoins légèrement supérieur à la normale. L'hyperérythémie constatée paraît bien être due à l'ozone et nous sommes d'avis qu'il faut attribuer l'accroissement des globules rouges chez les tuberculeux en montagne et au bord de la mer, à la présence de ce gaz dans l'atmosphère.

On a remarqué, d'autre part, que les écoles munies d'installation d'ozone, n'envoyaient aux établissements de cure d'air qu'un nombre d'enfants très inférieur aux autres.

Ce que dit la revue « Science et Vie »

« Comment l'on constata que l'ozone est favorable à la santé ?

» Des récents essais effectués sur des employés de la First National Bank de Chicago, ont montré qu'en respirant de l'air ozonisé, la respiration devenait plus profonde, et qu'au bout d'un certain temps l'on pouvait constater une importante augmentation de poids des sujets soumis à l'expérience.

» Les employés de la banque furent placés dans une salle où l'on n'avait jamais pu obtenir jusqu'alors une bonne ventilation, de l'ozone fut produit dans la salle même au moyen de quelques machines électriques placées dans les coins

» On mesura le tour de poitrine de chaque employé, on nota son poids, et deux mois après le jour où les machines électriques furent mises en activité, les mêmes mesures furent effectuées, l'on trouva que, dans ce court espace de temps, chaque employé avait gagné en poids aussi bien qu'en largeur de poitrine.

» Cette amélioration physique fut accompagnée d'un tel développement de leurs facultés mentales, que les employés eux-mêmes, enthousiasmés des résultats demandèrent qu'on généralisât la méthode ».

« SCIENCE ET VIE ».



Modèle JUNIOR

Modèle ordinaire. Universel 110 et 220 Volts. Livré avec une électrode simple.

Poids : 1 kg. 600.

Dimensions : 29 x 22 x 9 cm.

PRIX : 300 FR.



Modèle A

Modèle courant, appareil très soigné, universel 110 et 220 volts, fonctionnement parfait. Livré avec 8 électrodes simples, au choix du client.

Poids : 2 kg. 500.

Dimensions : 33 x 24 x 13 cm.

PRIX : 450 FR.

Modèle B


Modèle parfait au point de vue scientifique, fonctionnant sur le courant continu ou alternatif de 100 à 250 volts. Muni d'un milliampèremètre gradué de 0 à 200 MA., donnant le contrôle du bon fonctionnement de l'appareil.

Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Poids : 3 kg. 500.

Dimensions : 39 x 29 x 13 cm.

PRIX : 800 FR.

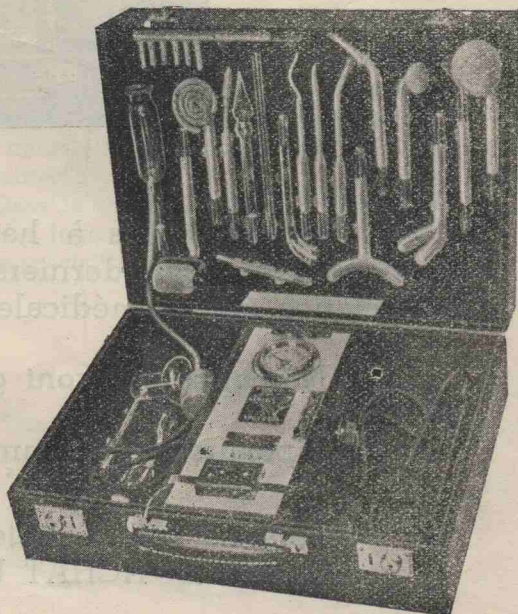

Modèle C (CHRONOGRAPHE)

Appareil fonctionnant par un mouvement d'horlogerie et destiné à assurer une production d'effluves pendant un nombre déterminé de minutes, dispositif échelonné de 0 à 15 minutes.


Muni d'un appareil de mesure gradué de 0 à 200 Milli-Ampères qui indique l'intensité de courant employé.

Fonctionnant sur le courant alternatif et continu de 100 à 250 volts. Livré avec 20 électrodes au choix du client.

Poids : 4 kgr.

Dimensions : 39 x 29 x 13 cm.

Unipolaire. - PRIX Frs. 1.000.-

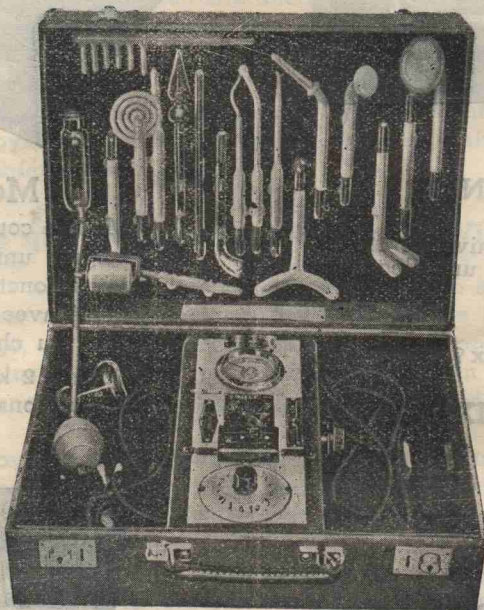

Les appareils à haute fréquence « EVERAY » comportent les derniers perfectionnements de la science électro-médicale.

Nos appareils sont garantis deux ans.

Bipolaires sur commande.

Lorsque vous achetez un appareil « EVERAY », vous faites un ACHAT UTILE.

ANTIPARASITE

L'Auxiliaire Electrique

A - POUR LES APPAREILS MEDICAUX A HAUTE FREQUENCE

Brancher au réseau la fiche mâle, livrée avec le filtre.

Relier la fiche femelle du filtre à la fiche mâle de l'appareil à haute fréquence.

Emmancher la gaine métallique sur la poignée de l'appareil.

Toute connexion à la terre est inutile aussi bien pour l'appareil à déparasiter que pour le filtre.

B. - POUR LES AUTRES APPAREILS PERTURBATEURS.


Montage comme indiqué ci-dessus, la gaine métallique restant inusitée, toutefois la borne (b) du filtre doit être reliée à la masse de l'appareil ou à la terre.

C. - POUR TOUS LES POSTES RECEPTEURS.

Montage comme indiqué au § B., la borne (b) du filtre étant reliée à la prise de terre du poste récepteur.

RECOMMANDATION SPECIALE :

- 1° Pour le fonctionnement saisir la poignée de l'appareil par la gaine métallique.
- 2° Lorsque le traitement est effectué par une deuxième personne, le patient devra tenir dans sa main une poignée métallique qui sera reliée à la borne (b).
- 3° Une distance minima de 4 à 6 m. sera nécessaire entre l'appareil perturbateur et le poste de T.S.F.
- 4° Ne pas se servir de l'appareil à haute fréquence dans le voisinage immédiat des antennes intérieures ou bien des conduites d'eau, de gaz ou de chauffage qui transmettent particulièrement bien les parasites.
- 5° Dans le cas où le fusible viendrait à fondre, faire appel au conseil d'un électricien spécialisé.

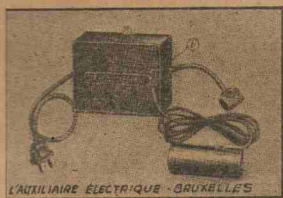

EMPLOI :

S'insère dans le circuit de branchement des appareils à haute fréquence et tous appareils émetteurs de troubles difficiles à éliminer ainsi que des postes récepteurs à courant continu et alternatif.

TENSION DE SERVICE :

Jusqu'à 250 volts courant continu et alternatif, 0,25 Ampère.

EXECUTION :


Boîtier en matière moulée avec branchement par fiches et fusibles interchangeables.

DIMENSIONS :

122 x 97 x 57 mm.

Poids : 840 gr.


PRIX : 185 FR.

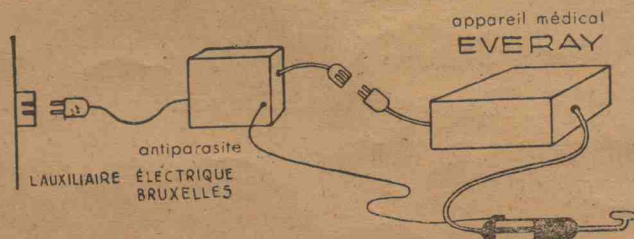

Cette brochure est distribuée
GRATUITEMENT
 Vous ferez une bonne œuvre
 en la communiquant aux
 personnes souffrantes qui ne
 connaissent pas
L'APPAREIL

"EVERAY"

qui dans les rapports généraux de l'électricité avec la santé opère un traitement efficace.

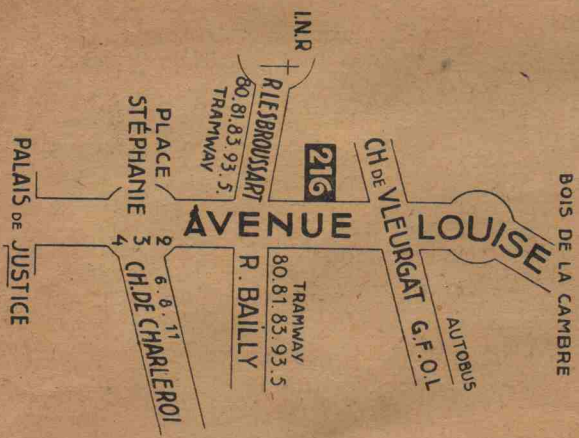

Reproduction interdite sans
 l'autorisation de la L. A. E.



electro-connexion.fr